

TASUKE

完整一體機、安心又實際

永不損壞、持續正確、熟練工匠精心淬煉
永久使用的T A S U K E



Made in Japan

承認番号：日本国農林水産省指令 24 動薬第 1363 号
KIMURAMED 動物用全身麻醉機「TASUKE」

 **KIMURAMED**
真木村株式會社


■主要特点

- 特點① 麻醉機身採用不銹鋼外殼與特殊塗層、永保光輝
特點② 簡潔、省空間的設計、重視機能和操作性
特點③ 採用節省空間的連接架結構、安裝汽化瓶




■主要規格

供給氣體	醫用氧氣・空氣 供給壓力 400±50kPa
尺寸	315W×225D×400H mm
重量	9.5 kg (不含汽化瓶)
流量計	氧氣 0.1~8.0L/分 空氣 0.5L~8.0L/分
氧氣沖洗閥	流量 35~70L/分
二氧化碳吸收瓶	1000mL
配件	一次性麻醉呼吸管路與呼吸袋 x 1 二氧化碳吸收劑 x 1

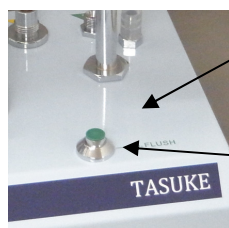


為了防止藥水造成的汙染及腐蝕。請隨時保持機身部份的清潔與光亮度。

在緊急狀態下，能夠短時間內可以提供大量的氧氣

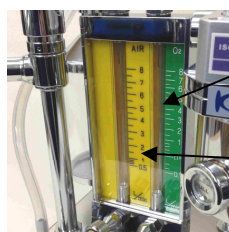

將氧氣與空氣流量計的刻度細分化，可以細微調整正確的流量。

設置有空氣流量計可長時間支持麻醉呼吸的使用。

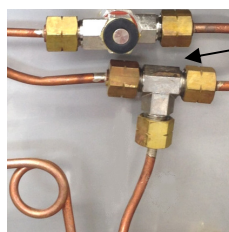

TASUKE 麻醉機品質秉持耐用的理念，內部的配管都是採用青銅作成，工法繁鎖，高成本，打造穩定性高且耐用的好機器。

■設置例



■選購品



汽化瓶「KIV-3」



汽化瓶「KIV-7」



人工呼吸器「VentStar」



二氧化碳吸收劑



麻醉廢氣回收瓶

首美達股份有限公司

台北市內湖區民權東路六段15巷16號4F-3

TEL : 02-2796-7222

www.soarmed.com

- 本目錄上記載的內容、規格及設計，有可能隨時更動，恕不另行告知。
- 使用本產品之前，必須詳細閱讀操作說明書，初次使用時請執行檢查與確認作業。
- 為了維持本產品的性能，需要進行定期保養檢查作業。詳情請與您的銷售代理商連繫。