

The veterinary equipment specialists


動物專用二合一軟硬內視鏡

享受二合一軟硬鏡通用的便利，廣泛的系統延伸性

同一台主機 可連接軟鏡也能連接硬鏡!



連接軟鏡示意圖

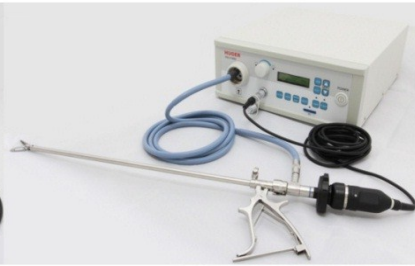

連接硬鏡AK-43示意圖

- 軟硬鏡共用主機：C-Mount 接口，適用各式軟硬鏡，創造不同的運用，且免於更換主機，節省另一購機成本與存放空間。
- 搭載 LED 冷光源，結合優化、自動白平衡、銳利度等影像處理功能。

- 擁有錄影&擷取模式選擇、採用 SD 記憶卡方便電腦存取。
- AGVE 系列，採用 SONY 44 萬畫素，CCD 鏡頭，快速成像、影像清晰，全螢幕影像呈現。
- 適用症狀：內視鏡下取異物、上消化道炎症、腸道寄生蟲、消化性潰瘍、消化道腫瘤。

主機規格

型號：VIS-2100

影像輸出：複合式影像

燈源：10W LED

燈源壽命：35000 小時

色溫：6000K

氣泵：靜音氣泵式

功能：自動白平衡、影像強化及優化處理、色調亮度調整、

錄影及拍照模式選擇、SD 卡儲存

軟鏡規格

型號：AGVE-2100S

頭端部外徑：8.0 mm

插入管外徑：8.0 mm

照射角度：120°

照射深度：3 - 100mm

鉗道孔徑：2.2mm

彎角：Up / Down : 210° / 90° ; Left / Right : 100°

工作長度：1500mm



首美達總騰股份有限公司
台北市權東路六段15巷16號4樓之3

Tel: 886-2-27967222 Fax: 886-2-27966010

Email: soarmed@soarmed.com.tw • www.soarmed.com