

TASUKE

完整一體機、安心又實際

永不損壞、持續正確、熟練工匠精心淬煉
永久使用的「TASUKE」



Made in Japan

批准文號：日本國農林水產省指令 24 動藥第 1363 號
真木村株式會社動物用吸入麻醉機「TASUKE」

 **KIMURAMED**
真木村株式會社


主要特點

- 一、麻醉機身採用不銹鋼外殼與特殊塗層、永保光輝。
- 二、簡潔、省空間的設計、重視機能和操作性。
- 三、採用節省空間的連接架結構、安裝蒸發罐。



主要規格

供給氣體	醫用氧氣・笑氣 供給壓力 400±50kPa
尺寸	315W×225D×400H mm
重量	9.5 kg (不含蒸發罐)
流量計	氧氣 0.1~8.0L/分 笑氣 0.5L~8.0L/分
氧氣沖洗閥	流量 35~70L/分
二氧化碳吸收罐	1000mL
配件	一次性麻醉呼吸管路與呼吸袋 X 1 二氧化碳吸收劑 X 1

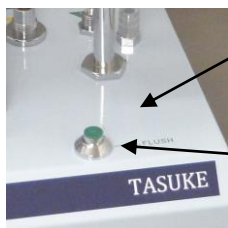


為了防止藥水造成的污染及腐蝕。請隨時保持機身部份的清潔與光亮度。

在緊急狀態下，能夠短時間內提供大量的氧氣。



將氧氣與笑氣流量計的刻度細分化，可以細微調整正確的流量。

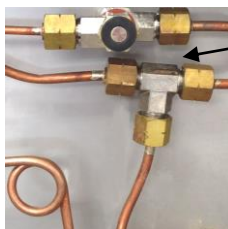

「TASUKE」品質秉持耐用的理念，內部的配管都是採用青銅作成，工藝繁細，高成本，打造穩定性高且耐用的好機器。

設置例



選購品



蒸發罐

真木村「KIV-3」型



蒸發罐

真木村「KIV-7」型



人工呼吸器
(VentStar)



二氧化碳吸收劑



麻醉廢氣回收瓶

首美達總騰股份有限公司

臺北市民權東路六段 15 巷 16 號 4F 之 3
TEL: (886) 2 27967222 FAX: (886) 2 27966010
✉ soarmed@soarmed.com.tw
<http://www.soarmed.com.tw/>

- 本目錄上記載的內容、規格及設計，有可能隨時更動，恕不另行告知。
- 使用本產品之前，必須詳細閱讀操作說明書，初次使用時請參照使用手冊進行預操作檢查。
- 為了維持本產品的性能，需要進行定期保養檢查。詳情請與您的銷售代理商聯繫。